

Ин витро диагностично медицинско изделие за определяне на наркотични или психотропни вещества в урина.

Тест лента

Листовка

Листовка за тестване от следните вещества:

Amphetamine, Amphetamine 500, Amphetamine 300, Barbiturates, Benzodiazepines, Benzodiazepines 200, Buprenorphine, Cocaine, Cocaine 150, Marijuana, Marijuana 150, Marijuana 20, Methadone, EDDP 300 (Methadone metabolite), EDDP 100 (Methadone metabolite), Methamphetamine, Methamphetamine 500, Methamphetamine 300, Methylenedioxymethamphetamine, Morphine 300, Opiate 2000, Oxycodone, Phencyclidine, Propoxyphene, Tricyclic Antidepressants, Tramadol, Ketamine and Fentanyl.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕЗЮМЕ

Уринни тестове Concateno Drug Screen Test Strip за бързо и качествено определяне на различни наркотични или психотропни вещества и техните главни метаболити в човешка урина. За професионална ин витро диагностична употреба. Уринните тестове Concateno Drug Screen Test Strip е имунохроматографски тест за бързо и качествено определяне на различни наркотични или психотропни вещества и техните главни метаболити в човешка урина при следните граници на чувствителност:1

ТЕСТ	КАЛИБРАТОР	граници на чувствителност (ng/mL)
Amphetamine (AMP)	d-Amphetamine	1,000
Amphetamine (AMP 500)	d-Amphetamine	500
Amphetamine (AMP 300)	d-Amphetamine	300
Barbiturates (BAR)	Secobarbital	300
Benzodiazepines (BZO)	Oxazepam	300
Benzodiazepines (BZO 200)	Oxazepam	200
Buprenorphine (BUP)	Buprenorphine	10
Cocaine (COC)	Benzoylecgonine	300
Cocaine (COC 150)	Benzoylecgonine	150
Marijuana (THC)	11-nor-Δ ⁹ -THC-9 COOH	50
Marijuana (THC 150)	11-nor-Δ ⁹ -THC-9 COOH	150
Marijuana (THC 20)	11-nor-Δ ⁹ -THC-9 COOH	20
Methadone (MTD)	Methadone	300
Methadone metabolite (EDDP 300)	2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-dipheylpyrrolidine (EDDP)	300
Methadone metabolite (EDDP 100)	2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-dipheylpyrrolidine (EDDP)	100
Methamphetamine (MET)	d-Methamphetamine	1,000
Methamphetamine (MET 500)	d-Methamphetamine	500
Methamphetamine (MET 300)	d-Methamphetamine	300
Methylenedioxymethamphetamine (MDMA)	d,l-Methylenedioxymethamphetamine	500
Morphine (MOP 300)	Morphine	300
Opiate (OPI 2000)	Morphine	2,000
Oxycodone (OXY)	Oxycodone	100
Phencyclidine (PCP)	Phencyclidine	25
Propoxyphene (PPX)	Propoxyphene	300
Tricyclic Antidepressants (TCA)	Nortriptyline	1,000
Tramadol (TRA)	Tramadol	100
Ketamine (KET)	Ketamine	1,000
Fentanyl (FTY)	Norfentanyl	20

Този тест ще открие други сродни съединения, моля, **вижте** по аналитичната таблица в тази листовка. Този анализ дава само предварителен аналитичен резултат от теста. По-специфичен алтернативен химически метод трябва да се използва, за да получи потвърден аналитичен резултат. Газова хроматография / мас-спектрометрия (GC / MS) е предпочитаният метод за потвърждение. Клинично разглеждане и професионална преценка следва да се прилага за всеки резултат от уринните тестове, особено когато предварителните резултати са положителни

ДЕЙСТВИЕ

Уринните тестове Concateno Drug Screen Test Strip са базирани на принципа на високо специфични имунохимични реакции на антигените и антителата, които се използват за определяне на наркотици, респективно на техните метаболити в човешка урина.

По време на тестването, урината мигрира по протежение на тест ленти по капилярен път. Ако присъства наркотик в урината под границата на чувствителност, няма да насити местата на свързване на своите специфични антитела. Антителата ще реагират с наркотичния протеин конюгат и видима цветна линия

ще се появи в тестовата зона. Наличието на наркотици над границата на чувствителност ще насити всички места за свързване с антителата. Следователно, цветна линия не се образува в тестовата зона Положителната проба от урина няма да генерира цветна линия в тестовата зона, поради конкуренцията на веществата, докато отрицателната проба от урина ще генерира линия в тестовата зона поради липсата на конкуренция. Да служи за процедурен контрол, цветна линия винаги ще се появи в контролната зоната, което показва, че е добавен правилния обем проба и е настъпило мембранно насищане.

РЕАГЕНТИ

Тестът съдържа миши моноклонално анти тяло-свързани частици и съответните протеинови конюгати на наркотиците. Кози антитела са използвани в контролна линия.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Само за професионална ин витро диагностика. Не използвайте тестовете след изтичане на срока на годност.
- Използвайте теста веднага след разопаковане.
- Всички проби трябва да се считат за потенциално опасни и обработват по същия начин като източник на инфекции
- Използваните тестове да се изхвърлят съгласно местните закони.
- Информационен лист за безопасност е наличен при поискване

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте в опаковката при стайна температура или в хладилник (2-30 ° C). Тестът е стабилен до изтичане на срока на годност, отпечатан върху фолиото или етикетта. Тестът трябва да остане в запечатан плик или затворен контейнер до използването. НЕ ЗАМРАЗЯВАЙТЕ. Не използвайте след изтичане на срока на годност. ЗАБЕЛЕЖКА: След като е отворен, тест (ове) са стабилни в продължение на 90 дни.

ВЗЕМАНЕ И РАБОТА С ПРОБИТЕ

УРИННА ПРОБА

Пробата от урина трябва да се събират в чист и сух съд. Урината, събрана по всяко време на деня може да се използва. Пробите от урина, показващи видими преципитати трябва да се центрофугират, филтрират, или оставени да се утаят да се получи ясна проба за тестване.

Съхранение на пробата

Пробата от урина, може да се съхранява при 2-8 ° C до 48 часа преди тестването. За продължително съхранение, пробите могат да бъдат замразени и съхранявани под -20 ° C. Замразените проби трябва да бъдат размразени и смесени добре преди тестване.

МАТЕРИАЛИ

ПРИЛОЖЕНИ


- Тест лента
- Листовка

Необходими материали извън приложението

- Колектор за проби
- Таймер
- Ръкавици

Употреба

Оставете тестове, урината, и / или контролата, за да достигнат стайна температура (15-30 ° C) преди тестването. 1. Оставете единичните тестове или контейнер с тестове на стайна температура преди да го отворите. Извадете тест лента от фолиото или контейнер и го използвате възможно най-скоро. ЗАБЕЛЕЖКА: За контейнерна опаковка, затворете контейнера плътно след взимане на необходимия брой тест ленти (а). Запишете началната дата за отваряне на кутията. След като кутията е отворена, останалите тест лента (и) са стабилни само за 90 дни. 2. Със стрелки, сочещи към пробата от урина, потопете тест лентата вертикално в урината в продължение на най-малко 10-15 секунди. Не потапяйте над линията на максималното (MAX) на тест лентите. Вижте илюстрацията по-долу. 3. Поставете тест лентата на неабсорбираща плоска повърхност, стартирате таймера и изчакайте за цветна линия (и), да се появят. Отчетете резултата след 5 минути. Не интерпретирайте резултат след 10 - тата минута.

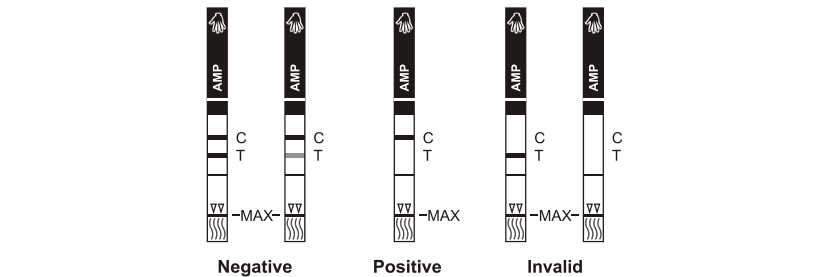

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

(Моля, вижте илюстрацията по-горе)

Отрицателен: * Две линии се появяват. Едната трябва да е в контролната зона (C), а друга цветна линия трябва

да бъде в тестовата зона (T). Този отрицателен резултат показва, че концентрацията на наркотично в-во е под откриваемото ниво.

* **Забележка:** степента на Оцветяване в тестовата зона (T) може да варира, но трябва да се считат за отрицателни, когато има дори слаба цветна линия.

Положителни: една цветна линия се появява в контролната зоната (C). Не се появява линия (T) в тестовата зона. Този положителен резултат показва, че концентрацията на наркотици е в откриваеми нива.

Невалиден: контролна линия не се появява. Недостъчното количество проба или неправилни процедурни техники са най-вероятните причини за липса на контролна линия. Препледайте процедурата и повторете теста с помощта на нов тест. Ако проблемът продължава, прекратете използването и се свържете с местния дистрибутор

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

Процедурен контрол е включен в теста. Цветната линия, която се появява в контролната зона (C) се счита за втрешен процедурен контрол. Тя потвърждава необходимия обем проба, адекватното мембранно разделяне и правилните процедурни техники. Контролни стандарти не се доставят с комплекта. Въпреки това се препоръчва да се изпитват положителни и отрицателни контроли като добра лабораторна практика, за да потвърдите процедурата на теста и проверка на ефективността.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Уринни тестове Concateno Drug Screen Test Strip дават само качествен, предварителен аналитичен резултат. Необходим е вторичен аналитичен метод, за потвърждение на резултатите. Газова хроматография / мас-спектрометрия (GC / MS) е предпочитаният потвърдителен метод
- Технически или процедурни грешки, както и други интерферирაცი вещества в урината може да доведатдо грешни резултати.
- Примеси, като например белина и / или стипца, в проби от урина може да доведот до грешни резултати, независимо от използвания аналитичен метод. Ако има съмнение за фалшификация, тестът трябва да се повтори с друга урина.
- Положителен резултат не индикира ниво или интоксикация, начин на приложение или концентрация в урината.
- Отрицателният резултат не означава непременно, без наркотици урината. Отрицателните резултати могат да бъдат получени, и когато наркотичното в-во е налично, но под граничното ниво на теста.
- Този тест не се прави разлика между наркотични в-ва и някои медикаменти.
- Положителен резултат може да бъде получен от определени храни или хранителни добавки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОЧНОСТ

Сравненителни тестове са проведени между Уринни тестове Concateno Drug Screen Test Strip и други предлагани в търговската мрежа бързи тест за наркотици. Тествани са приблизително 300 образци, които по-рано са събрани от лица. Положителните резултати бяха потвърдени от GC / MS. Отрицателни проби урина бяха проверени първоначално с Предикатни тестове, като 10% отрицателни проби бяха потвърдени от GC / MS. Табличени резултати:

% Съвпадение с други тестове														
проба	AMP	AMP 500	AMP 300	BAR	BZO	BZO 200	BUP**	COC	COC 150	THC	THC 150	THC 20	MTD	EDDP 300
Positive	97%	*	>99%	>99%	90%	*	88%	95%	>99%	98%	*	*	>99%	*
Negative	>99%	*	>99%	99%	97%	*	>99%	>99%	>99%	>99%	*	*	>99%	*
Общо	98%	*	>99%	99%	94%	*	97%	98%	>99%	99%	*	*	>99%	*

проба	EDDP 100	MET	MET 500	MET 300	MDMA	MOP 300	OPI 2000	OXY	PCP	PPX	TCA	TRA	KET	FTY
Positive	*	98%	>99%	*	>99%	>99%	99%	96%	98%	>99%	95%	*	*	*
Negative	*	>99%	80%	*	99%	>99%	>99%	99%	>99%	>99%	>99%	*	*	*
Общо	*	99%	87%	*	99%	>99%	>99%	98%	>99%	>99%	99%	*	*	*

* **Забележка:** тестове не са налични за сравнително тестване.
** **Забележка:** BUP е сравнен с призната употреба на Buprenorphine.

% Съвпадение GC/MS														
проба	AMP	AMP 500	AMP 300	BAR	BZO	BZO 200	BUP*	COC	COC 150	THC	THC 150	THC 20	MTD	EDDP 300
Positive	97%	95%	>99%	92%	97%	98%	98%	96%	99%	96%	91%	87%	99%	>99%
Negative	95%	>99%	99%	98%	95%	99%	>99%	90%	99%	97%	96%	99%	94%	94%
Общо	96%	98%	99%	95%	96%	99%	>99%	93%	99%	96%	96%	95%	96%	96%

проба	EDDP 100	MET	MET 500	MET 300	MDMA	MOP 300	OPI 2000	OXY	PCP	PPX	TCA**	TRA*	KET	FTY*
Positive	98%	99%	>99%	97%	97%	>99%	98%	99%	>99%	94%	>99%	99%	>99%	99%
Negative	>99%	94%	97%	>99%	>99%	94%	97%	98%	96%	99%	89%	96%	95%	90%
Общо	99%	96%	98%	98%	98%	97%	98%	99%	97%	96%	91%	97%	95%	93%

* **Забележка:** BUP, TRA и FTY се базират на LC/MS а не на GC/MS.
** **Забележка:** TCA се базират на HPLC а не на GC/MS.

АНАЛИТИЧНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Към уринна проба без наркотици бяха добавени наркотици в концентрации съответно на ± 50% и ± 25% граница на чувствителност. Резултатите са обобщени по-долу

Drug Conc.	AMP	AMP 500	AMP 300	BAR	BZO	BZO 200	BUP	COC	COC 150
------------	-----	---------	---------	-----	-----	---------	-----	-----	---------

(Cut-off range)	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
0% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	60	0	90	0	30	0	30	0
-50% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	60	0	90	0	30	0	30	0
-25% Cut-off	22	8	25	5	27	3	27	3	27	3	60	0	75	15	30	0	24	6
Cut-off	12	18	11	19	13	17	22	8	11	19	22	38	60	30	4	26	14	16
+25% Cut-off	2	28	5	25	4	26	8	22	5	25	2	58	31	59	0	30	7	23
+50% Cut-off	0	30	0	30	0	30	2	28	0	30	0	60	0	90	0	30	0	30
Drug Conc. (Cut-off range)	THC	THC 20	THC 150	MTD	EDDP 300	EDDP 100	MET	MET 500	MET 300									
0% Cut-off	30	0	30	0	90	0	30	0	90	0	90	0	30	0	30	0	30	0
-50% Cut-off	30	0	30	0	90	0	29	1	90	0	90	0	30	0	30	0	30	0
-25% Cut-off	12	18	27	3	90	0	24	6	90	0	90	0	30	0	23	7	27	3
Cut-off	1	29	24	6	46	44	21	9	51	39	37	53	18	12	13	17	15	15
+25% Cut-off	1	29	17	13	5	85	2	28	14	76	8	82	1	29	8	22	4	26
+50% Cut-off	0	30	5	25	0	90	0	30	0	90	0	90	0	30	0	30	0	30

Drug Conc. (Cut-off range)	MDMA	MOP 300	OPI 2000	OXY	PCP	PPX	TCA	TRA	KET	FTY								
0% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	90	0	90	0	90	0
-50% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	90	0	90	0	90	0
-25% Cut-off	26	4	25	5	25	5	30	0	19	11	24	6	29	1	90	0	61	29
Cut-off	17	13	17	13	15	15	18	12	16	14	17	13	18	12	61	29	20	70
+25% Cut-off	4	26	1	29	6	24	6	24	6	24	7	23	5	25	21	69	2	88
+50% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	2	88	0	90

АНАЛИТИЧНА СПЕЦИФИКА

Следната таблица изброява концентрация на съединения (ng/mL), които са открити положителни в урината с уринните тестове Concateno Drug Screen Test Strip

AMPHETAMINE	
d-Amphetamine	1,000
d,l-Amphetamine	3,000
l-Amphetamine	50,000
d,l-3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDA)	2,000
Phentermine	3,000
AMPHETAMINE 500	
d-Amphetamine	500
d,l-Amphetamine	1,500
3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDA)	800
Phentermine	1,500
β-Phenylethylamine	50,000
Tryptamine	50,000
Tyramine	25,000

AMPHETAMINE 300	
d-Amphetamine	300
d,l-Amphetamine	390
l-Amphetamine	50,000
p-Hydroxyamphetamine	1,560
p-Hydroxynorephedrine	100,000
3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDA)	1,560
β-Phenylethylamine	100,000
Phenylpropanolamine (d,l-Norephedrine)	100,000
Tyramine	100,000

BARBITURATES	
Secobarbital	300
Alphenal	150
Amobarbital	300
Aprobarbital	200
Butobarbital	75
Butalbital	2,500
Butethal	100
Cyclopentobarbital	600
Pentobarbital	300
Phenobarbital	100
OXYCODONE	
Oxycodone	100

BUPRENORPHINE	
Buprenorphine	10
Buprenorphine 3-D-glucuronide	15
Norbuprenorphine	20
Norbuprenorphine 3-D-glucuronide	200

METHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE (MDMA)	
d,l-3,4-Methylenedioxmethamphetamine (MDMA)	500
d,l-3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDA)	3,000
3,4-Methylenedioxyethylamphetamine (MDEA)	300

METHAMPHETAMINE	
d-Methamphetamine	1,000
p-Hydroxymethamphetamine	30,000
Mephentermine	50,000
l-Methamphetamine	8,000
d,l-3,4-Methylenedioxmethamphetamine (MDMA)	2,000

METHAMPHETAMINE 500	
d-Methamphetamine	500
d,l-Amphetamine	75,000
d-Amphetamine	50,000
Chloroquine	12,500
(1R,2S)-l-Ephedrine	50,000
p-Hydroxymethamphetamine	15,000

Mephentermine	25,000
l-Methamphetamine	4,000
3,4-Methylenedioxmethamphetamine (MDMA)	1,000
l-Phenylephrine	100,000
β-Phenylethylamine	75,000

METHAMPHETAMINE 300	
d-Methamphetamine	300
d,l-Amphetamine	100,000
Chloroquine	25,000
Ephedrine	100,000
(1R,2S)-l-Ephedrine	100,000
l-Epinephrine	50,000
Fenfluramine	12,500
p-Hydroxymethamphetamine	25,000
Mephentermine	50,000

Hydrocodone	6,250
Hydromorphone	50,000
Levorphanol	50,000
Naloxone	37,500
Naltrexone	37,500
Oxymorphone	200

BENZODIAZEPINES	
Oxazepam	300
Alprazolam	196
Bromazepam	1,562
Chlordiazepoxide	1,562
Clobazam	98
Clonazepam	781
Clorazepate	195
Delorazepam	1,562
Desalkylflurazepam	390
Diazepam	195
Estazolam	2,500
Flunitrazepam	390
α-Hydroxyalprazolam	1,262
d,l-Lorazepam	1,562

RS-Lorazepam glucuronide	156
Midazolam	12,500
Nitrazepam	98
Norchlordiazepoxide	195
Nordiazepam	390
Temazepam	98
Triazolam	2,500

BENZODIAZEPINES 200	
Oxazepam	200
Alprazolam	30
7-Aminoclonazepam	4,000
7-Aminoflunitrazepam	390
7-Aminonitrazepam	625
Bromazepam	390
Chlordiazepoxide	300
Clobazam	48
Clorazepate	97
Desalkylflurazepam	1,560
Diazepam	97
Estazolam	125
Flunitrazepam	25,000
α-Hydroxyalprazolam	30
d-Lorazepam	3,125
Midazolam	195
Nitrazepam	780
Norchlordiazepoxide	780
Nordiazepam	780
Temazepam	32
Triazolam	150

MARIJUANA	
11-nor-Δ ⁸ -THC-9 COOH	50
Cannabinol	20,000
11-nor-Δ ⁹ -THC-9 COOH	30
Δ ⁸ -THC	15,000
Δ ⁹ -THC	15,000

MARIJUANA 20	
11-nor-Δ ⁹ -THC-9 COOH	20
Cannabinol	12,500
11-nor-Δ ⁸ -THC-9 COOH	20
Δ ⁸ -THC	10,000
Δ ⁹ -THC	12,500

MARIJUANA 150	
11-nor-Δ ⁸ -THC-9 COOH	150
Cannabinol	25,000

l-Methamphetamine	3,125
3,4-Methylenedioxmethamphetamine (MDMA)	780
Trimethobenzamide	25,000
PHENCYCLIDINE	
Phencyclidine	25
4-Hydroxyphencyclidine	12,500

COCAINE	
Benzoyllecgonine	300
Cocaine	780
Cocaethylene	12,500
Ecgonine	32,000

COCAINE 150	
Benzoyllecgonine	150
Cocaine	400
Cocaethylene	6,250
Ecgonine	12,500
Ecgonine methylester	50,000

METHADONE	
Methadone	300
Doxylamine	50,000

EDDP 300	
2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP)	300

EDDP 100	
2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP)	100

MORPHINE 300	
Morphine	300
Codeine	300

Ethylmorphine	6,250
Hydrocodone	50,000
Hydromorphone	3,125
Levorphanol	1,500
6-Monoacetylmorphine (6-MAM)	400
Morphine 3-β-D-glucuronide	1,000
Norcodeine	6,250
Normorphine	100,000
Oxycodone	30,000
Oxymorphone	100,000
Procaine	15,000
Thebaine	6,250

OPIATE 2000	
Morphine	2,000
Codeine	2,000
Ethylmorphine	5,000
Hydrocodone	12,500
Hydromorphone	5,000
Levorphanol	75,000
6-Monoacetylmorphine (6-MAM)	5,000
Morphine 3-β-D-glucuronide	2,000
Norcodeine	12,500
Normorphine	50,000
Oxycodone	25,000
Oxymorphone	25,000
Procaine	150,000
Thebaine	100,000

TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS	
Nortriptyline	1,000
Ami triptyline	1,500
Clomipramine	12,500
Desipramine	200
Doxepin	2,000
Imipramine	400
Maprotiline	2,000
Nordoxepin	1,000
Promazine	1,500
Promethazine	25,000

11-nor-Δ ⁸ -THC-9 COOH	500
Δ ⁸ -THC	25,000
Δ ⁹ -THC	25,000
PROPOXYPHENE	
d-Propoxyphene	300
d-Norpropoxyphene	300
FENTANYL	
Alfentanyl	562,500
Buspirone	12,500
Fenfluramine	37,500
Fentanyl	100
Norfentanyl	20
Sufentanyl	57,500

Trimipramine	3,000
TRAMADOL	
n-Desmethyl-cis-tramadol	195
o-Desmethyl-cis-tramadol	6,250
Cis-tramadol	100
Phencyclidine	100,000
Procyclidine	100,000
d,l-O-Desmethyl venlafaxine	25,000
KETAMINE	
Ketamine	1,000
Pentobarbital	50,000
Secobarbital	100,000
Norketamine	50,000

КРЪСТОСАНА АКТИВНОСТ

Бе проведено проучване за определяне на кръстосана реактивност на теста със съединения в чиста наркотици урината и Amphetamine, Amphetamine 500, Amphetamine 300, Barbiturates, Benzodiazepines, Benzodiazepines 200, Buprenorphine, Cocaine, Cocaine 150, Marijuana, Marijuana 150, Marijuana 20, Methadone, EDDP 300, EDDP 100, Methamphetamine, Methamphetamine 500, Methamphetamine 300, Methylenedioxmethamphetamine, Morphine 300, Opiate 2000, Oxycodone, Phencyclidine, Propoxyphene, Tricyclic Antidepressants, Tramadol, Ketamine и Fentanyl позитивна урина. Следните компоненти не показаха кръстосана активност при тестване в концентрации 100 µg/mL.

Не кръстосана активност

4-Acetamidophenol	Diclofenac	Labelalol	Phenothiazine
Acetone	Dicyclomine	Lidocaine	Prednisolone
Acetophenetidin	Diffunisal	Lindane	Prednisone
Acetylsalicylic acid	Digoxin	Lithium	d,l-Propanolol
Albumin	4-Dimethylaminoantipyrine	Loperamide	Quinacrine
alpha-Naphthaleneacetic Acid	Diphenhydramine	l-Thyroxine	Quinidine
Aminopyrine	5,5-Diphenylhydantoin	Meperidine	Quinine
Amoxapine	EMDP	Meprobamate	R(-) Deprenyl
Amoxicillin	Erythromycin	l-Methamphetamine	Riboflavin
		[(-) Deoxyephedrine]	
Ampicillin	β-Estradiol	Methaqualone	Salicylic acid
Apomorphine	Estrone-3-sulfate	Methoxyphenamine	Serotonin
Ascorbic acid	Ethyl alcohol	Methylphenidate	Seroquel
Aspartame	Ethyl-p-aminobenzoate	Methpyrrolin	Sertraline
Atropine	Etodolac	Metoprolol	Sodium Chloride
Benzilic acid	Famprofazone	N-Acetylprocainamide	Sulfamethazine
Benzoic acid	Nalidixen	Sulindac	Sulindac
Benzydamine	Fluoxetine	Nalorphine	Tetracycline
Brompheniramine	Furosemide	Naproxen	Tetrahydrocortison-3-acetate
Caffeine	Gentisic acid	Niacinamide	Tetrahydrozoline
Cannabidiol	d-Glucose	Nifedipine	Theophylline
Chloral Hydrate	Guaiacol Glyceryl Ether	Nimesulide	Thiamine
Chloramphenicol	Hemoglobin	Norethindrone	Thioridazine
Chloroquine	Hydralazine	Noscapine	Tolbutamide
Chlorothiazide	Hydrochlorothiazide	d,l-Octopamine	Trans-2-phenylcyclopropylamine
Chlorpromazine	Hydrocortisone	Orphenadrine	Trazodone
Chlorprothixene	o-Hydroxyhippuric acid	Oxalic acid	Triamterene
Cholesterol	3-Hydroxytyramine	Oxolinic acid	Trifluoperazine
Cimetidine	Hydroxyzine	Oxyetazoline	Trimethoprim
Clonidine	Ibuprofen	Papaverine	d,l-Tryptophan
Cortisone	Iproniazid	Pemoline	d,l-Tyrosine
l-Cotinine	Isoproterenol	Penicillin	Uric acid
Creatinine	Isoxsuprine	Pentazocine	Verapamil
Deoxycorticosterone	Kanamycin	Phenazine	Zomepirac
Dextromethorphan	Ketoprofen	Pheniramine	

БИБЛИОГРАФИЯ

- Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry. W.B. Saunders Company. 1986; 1735
- Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 2nd Ed. Biomedical Publ., Davis, CA. 1982; 488
- Hawks RL, CN Chiang. *Urine Testing for Drugs of Abuse*. National Institute for Drug Abuse (NIDA), Research Monograph 73, 1986

Символи			
	Инструкции за употреба		тестове
	Само за професионална ин витро диагностика		Използвай преди
	Съхранение 2-30°C		Партида
			Кат. номер



Concateno
92 Milton Park, Abingdon,
Oxfordshire OX14 4RY, UK
Tel: +44 (0) 1235 861483
Email: customerservice@concateno.com



Number: 1155953705
Effective date: 2012-05-17